

TECNOLOGIA
PRECISÃO
CONFIANÇA
RESULTADOS

dérig

Implantes do Brasil

SOLUÇÕES
QUE CONSTROEM
NOVOS SORRISOS



TRI



DYNAMIC



HEX



CMH



KORT



ZIGOMÁTICO

EXCELENCIA EM IMPLANTES

BIOTITE TECHNOLOGY

Mais que uma superfície. É desempenho clínico.

O revestimento Biotite representa a tecnologia de superfície da Dérig, desenvolvido para ampliar a área de contato, favorecer a estabilidade e contribuir para um processo de osseointegração mais previsível.

01 Precisão microscópica

02 Engenharia de superfície

03 Maior área de contato



Micro-porosidade controlada

Maior área de contato ósseo

*“Desempenho começa onde
os olhos não veem.”*


BIONECK CMH

CONE MORSE HEXAGONAL | CMH



Características

- Uma única interface interna cone morse para todos os diâmetros de implantes
- Sulcos retentivos nas roscas: maior área de contato e estabilidade primária
- Superfície Biotite: microporosidade obtida através de duplo ataque ácido, aumentando a estabilidade secundária
- Diâmetros dos implantes:
Bioneck CMH 3,5
Bioneck CMH 4,3

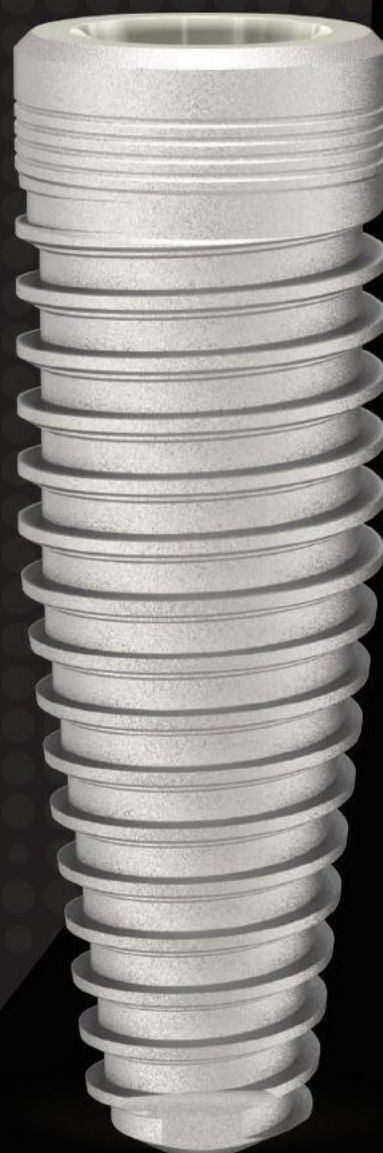

Perfuração

800 - 1200 rpm

Inserção

30 rpm

Torque Máx.

45 Ncm


*Para mais informações, consulte a Tabela de Torque na página 76

IMPLANTES Ø 3,5 mm

Altura	"D"	"Pl"	"P"	"b"	"d"	"L"	Código	Componentes
8 mm	Ø 3,75 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3 mm	0,65 mm	Ø 2,3 mm	8,5 mm	02.23.16.221	CMH NP
10 mm						10,5 mm	02.23.16.222	
11,5 mm						12 mm	02.23.16.223	
13 mm						13,5 mm	02.23.16.224	
16 mm						16,5 mm	02.23.16.225	

IMPLANTES Ø 4,3 mm

Altura	"D"	"Pl"	"P"	"b"	"d"	"L"	Código	Componentes
8 mm	Ø 4,3 mm	Ø 3,9 mm	Ø 3 mm	0,7 mm	Ø 2,7 mm	8,5 mm	02.23.16.251	CMH NP
10 mm						10,5 mm	02.23.16.252	
11,5 mm						12 mm	02.23.16.253	
13 mm						13,5 mm	02.23.16.254	
16 mm						16,5 mm	02.23.16.255	

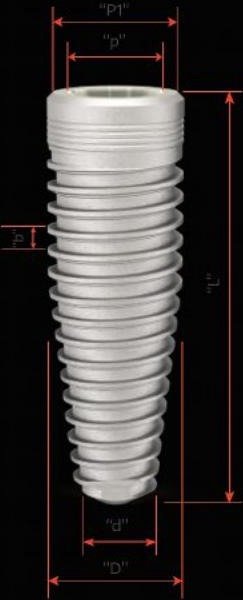

	Descrição	Plataforma	Altura da Cinta	Código
	Parafuso de Cobertura	NP		02.23.09.002
	Pilar de Cicatrização Ø3,6	NP	3 mm	02.23.02.131
			5 mm	02.23.02.151
			7 mm	02.23.02.171
	Pilar de Cicatrização Ø5	NP	3 mm	02.23.02.132
			5 mm	02.23.02.152
			7 mm	02.23.02.172
	Pilar de Cicatrização Perfilado	NP	1,5 mm	02.23.02.115
			2,5 mm	02.23.02.125
			3,5 mm	02.23.02.135
			4,5 mm	02.23.02.145
			5,5 mm	02.23.02.155



SEQUÊNCIA DE BROCAS



Altura	Lança	Ø 2,0	Broca Cônica Ø 3,5	Broca Cônica Ø 4,3	Broca Cônica Ø 5,0	Macho de Rosca
Ø 3,5	•	•	•			○
Ø 4,3	•	•	•	•		○

○ = Opcional de acordo com a densidade óssea

CHAVE DE INSERÇÃO

- Torque interno com sistema grip de captura e inserção
- Maior resistência mecânica à inserção
- Potencializa a segurança no transporte do implante
- Preserva a integridade do cone morse
- Chave de inserção única para catraca e contra-ângulo

A instalação do implante pode ser iniciada com a chave de captura no contra-ângulo. Posteriormente, a inserção poderá ser finalizada com torquímetro manual.


	Descrição	Código
	Chave de Inserção CMH NP Curta	02.01.11.233
	Chave de Inserção CMH NP Longa	02.01.11.234

BIODENT CMH

CONE MORSE HEXAGONAL | CMH

Características

- Uma única interface interna cone morse para todos os diâmetros de implantes
- Sulcos retentivos nas roscas: maior área de contato e estabilidade primária
- Superfície Biotite: microporosidade obtida através de duplo ataque ácido, aumentando a estabilidade secundária
- Diâmetros dos implantes:
Biodent CMH 3,3
Biodent CMH 3,75
Biodent CMH 4,3

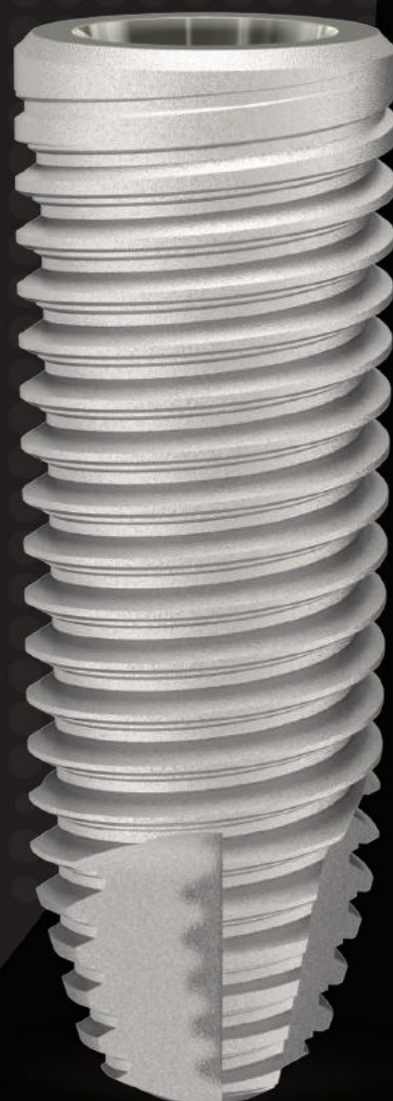

Perfuração

800 - 1200 rpm

Inserção

30 rpm

Torque Máx.

45 Ncm

*Para mais informações, consulte a Tabela de Torque na página 76

IMPLANTES Ø 3,3 mm

Altura	"D"	"P1"	"P"	"b"	"d"	"L"	Código	Componentes
10 mm	Ø3,3 mm	Ø 3,3 mm	Ø 2,5 mm	1 mm	Ø 2,1 mm	9,5 mm	02.23.16.111	CMH 3.0P
11,5 mm						11 mm	02.23.16.112	
13 mm						12,5 mm	02.23.16.113	

IMPLANTES Ø 3,75 mm

Altura	"D"	"P1"	"P"	"b"	"d"	"L"	Código	Componentes
8,5 mm	Ø3,75 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3 mm	1,2 mm	Ø 2,3 mm	8 mm	02.23.16.131	CMH NP
10 mm						9,5 mm	02.23.16.132	
11,5 mm						11 mm	02.23.16.133	
13 mm						12,5 mm	02.23.16.134	
15 mm						14,5 mm	02.23.16.135	
17 mm						16,5 mm	02.23.16.136	

IMPLANTES Ø 4,3 mm

Altura	"D"	"P1"	"P"	"b"	"d"	"L"	Código	Componentes
8,5 mm	Ø 4,3 mm	Ø 3,9 mm	Ø 3 mm	1,2 mm	Ø 2,8 mm	8 mm	02.23.16.151	CMH NP
10 mm						9,5 mm	02.23.16.152	
11,5 mm						11 mm	02.23.16.153	
13 mm						12,5 mm	02.23.16.154	
15 mm						14,5 mm	02.23.16.155	
17 mm						16,5 mm	02.23.16.156	



	Descrição	Plataforma	Altura da Cinta	Código
	Parafuso de Cobertura	3.0P		02.23.09.001
	Pilar de Cicatrização Ø3,2	3.0P	3 mm	02.23.02.031
			5 mm	02.23.02.051
			7 mm	02.23.02.071
	Pilar de Cicatrização Ø3,8	3.0P	3 mm	02.23.02.032
			5 mm	02.23.02.052
			7 mm	02.23.02.072
	Parafuso de Cobertura	NP		02.23.09.002
	Pilar de Cicatrização Ø3,6	NP	3 mm	02.23.02.131
			5 mm	02.23.02.151
			7 mm	02.23.02.171
	Pilar de Cicatrização Ø5	NP	3 mm	02.23.02.132
			5 mm	02.23.02.152
			7 mm	02.23.02.172
	Pilar de Cicatrização Perfilado	NP	1,5 mm	02.23.02.115
			2,5 mm	02.23.02.125
			3,5 mm	02.23.02.135
			4,5 mm	02.23.02.145
			5,5 mm	02.23.02.155



SEQUÊNCIA DE BROCAS



Altura	Lança	Ø 2,0	Ø 2,8	Ø 3,0	Ø 3,15	Ø 3,5	Ø 4,3	Macho de Rosca	Countersink UN
Ø 3,3	●	●	○					○	○
Ø 3,75	●	●	●	○				○	○
Ø 4,3	●	●	●	●	●	●	○	○	○

○ = Opcional de acordo com a densidade óssea

CHAVE DE INSERÇÃO

- Torque interno com sistema grip de captura e inserção
- Maior resistência mecânica à inserção
- Potencializa a segurança no transporte do implante
- Preserva a integridade do cone morse
- Chave de inserção única para catraca e contra-ângulo

A instalação do implante pode ser iniciada com a chave de captura no contra-ângulo. Posteriormente, a inserção poderá ser finalizada com torquímetro manual.

	Descrição	Código
	Chave de Inserção CMH 3.OP Curta	02.01.11.231
	Chave de Inserção CMH 3.OP Longa	02.01.11.232
	Chave de Inserção CMH NP Curta	02.01.11.233
	Chave de Inserção CMH NP Longa	02.01.11.234

DYNAMIC CMH

CONE MORSE HEXAGONAL | CMH

Características

- Uma única interface interna cone morse para todos os diâmetros de implantes
- Sulcos retentivos nas roscas: maior área de contato e estabilidade primária
- Superfície Biotite: microporosidade obtida através de duplo ataque ácido, aumentando a estabilidade secundária
- Diâmetros dos implantes:
Dynamic CMH 3,5
Dynamic CMH 4,3
Dynamic CMH 5,0



Perfuração

800 - 1200 rpm

Inserção

30 rpm

Torque Máx.

45 Ncm

*Para mais informações, consulte a Tabela de Torque na página 76

IMPLANTES Ø 3,5 mm

Altura	"D"	"PI"	"P"	"b"	"d"	"L"	Código	Componentes
8,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3 mm	2,4 mm	Ø 2,6 mm	8 mm	02.23.16.321	CMH NP
10 mm						9,5 mm	02.23.16.322	
11,5 mm						11 mm	02.23.16.323	
13 mm						12,5 mm	02.23.16.324	
15 mm						14,5 mm	02.23.16.325	

IMPLANTES Ø 4,3 mm

Altura	"D"	"PI"	"P"	"b"	"d"	"L"	Código	Componentes
8,5 mm	Ø 4,3 mm	Ø 3,9 mm	Ø 3 mm	2,4 mm	Ø 3,2 mm	8 mm	02.23.16.351	CMH NP
10 mm						9,5 mm	02.23.16.352	
11,5 mm						11 mm	02.23.16.353	
13 mm						12,5 mm	02.23.16.354	
15 mm						14,5 mm	02.23.16.355	

IMPLANTES Ø 5,0 mm

Altura	"D"	"PI"	"P"	"b"	"d"	"L"	Código	Componentes
8,5 mm	Ø 4,9 mm	Ø 3,9 mm	Ø 3 mm	2,4 mm	Ø 3,6 mm	8 mm	02.23.16.361	CMH NP
10 mm						9,5 mm	02.23.16.362	
11,5 mm						11 mm	02.23.16.363	
13 mm						12,5 mm	02.23.16.364	
15 mm						14,5 mm	02.23.16.365	



	Descrição	Plataforma	Altura da Cinta	Código
	Parafuso de Cobertura	NP		02.23.09.002
	Pilar de Cicatrização Ø3,6	NP	3 mm	02.23.02.131
			5 mm	02.23.02.151
			7 mm	02.23.02.171
	Pilar de Cicatrização Ø5	NP	3 mm	02.23.02.132
			5 mm	02.23.02.152
			7 mm	02.23.02.172
	Pilar de Cicatrização Perfilado	NP	1,5 mm	02.23.02.115
			2,5 mm	02.23.02.125
			3,5 mm	02.23.02.135
			4,5 mm	02.23.02.145
			5,5 mm	02.23.02.155



SEQUÊNCIA DE BROCAS



Altura	Lança	Ø 2,0	Ø 2,8	Ø 3,0	Ø 3,15	Ø 3,5	Ø 4,3	Countersink UN
Ø 3,5	●	●	○	○				○
Ø 4,3	●	●	●	●	○	○		○
Ø 5,0	●	●	●	●	●	●	○	○

○ = Opcional de acordo com a densidade óssea

CHAVE DE INSERÇÃO

- Torque interno com sistema grip de captura e inserção
- Maior resistência mecânica à inserção
- Potencializa a segurança no transporte do implante
- Preserva a integridade do cone morse
- Chave de inserção única para catraca e contra-ângulo

A instalação do implante pode ser iniciada com a chave de captura no contra-ângulo. Posteriormente, a inserção poderá ser finalizada com torquímetro manual.

	Descrição	Código
	Chave de Inserção CMH NP Curta	02.01.11.233
	Chave de Inserção CMH NP Longa	02.01.11.234

DYNAMIC CMH 3.0P

CONE MORSE HEXAGONAL | CMH 3.0P



Características

- Uma única interface interna cone morse para todos os diâmetros de implantes
- Sulcos retentivos nas roscas: maior área de contato e estabilidade primária
- Implante estreito: indicado para espaços interdentais limitados
- Superfície Biotite: microporosidade obtida através de duplo ataque ácido, aumentando a estabilidade secundária
- Diâmetros dos implantes:
Dynamic CMH 3.0P 3



Perfuração

800 - 1200 rpm

Inserção

30 rpm

Torque Máx.

45 Ncm

*Para mais informações, consulte a Tabela de Torque na página 76

IMPLANTES Ø 3 mm

Altura	"D"	"P"	"b"	"d"	"L"	Código	Componentes
10 mm	Ø 3 mm	2,5 mm	2 mm	Ø 2 mm	9,5 mm	02.23.16.301	CMH 3.OP
11,5 mm					11 mm	02.23.16.302	
13 mm					12,5 mm	02.23.16.303	



	Descrição	Plataforma	Altura da Cinta	Código
	Parafuso de Cobertura	3.OP		02.23.09.001
	Pilar de Cicatrização Ø3,2	3.OP	3 mm	02.23.02.031
			5 mm	02.23.02.051
			7 mm	02.23.02.071
	Pilar de Cicatrização Ø3,8	3.OP	3 mm	02.23.02.032
			5 mm	02.23.02.052
			7 mm	02.23.02.072



SEQUÊNCIA DE BROCAS

								
Altura	Lança	Ø 2,0	Ø 2,8	Ø 3,0	Ø 3,15	Ø 3,5	Ø 4,3	Countersink UN
Ø 3	•	•	○					

○ = Opcional de acordo com a densidade óssea

CHAVE DE INSERÇÃO

- Torque interno com sistema *grip* de captura e inserção
- Maior resistência mecânica à inserção
- Potencializa a segurança no transporte do implante
- Preserva a integridade do cone morse
- Chave de inserção única para catraca e contra-ângulo

A instalação do implante pode ser iniciada com a chave de captura no contra-ângulo.

Posteriormente, a inserção poderá ser finalizada com torquímetro manual.

	Descrição	Código
	Chave de Inserção CMH 3.OP Curta	02.01.11.231
	Chave de Inserção CMH 3.OP Longa	02.01.11.232

BIONECK TRI

TRIPLO CANAL INTERNO | TRI

Características

- Implante cônico
- Interface interna triplo canal
- Torque interno com sistema de captura e inserção
- Microcanaís cervicais
- Macrogeometria com alta estabilidade primária
- Sulcos retentivos nas roscas: maior área de contato e estabilidade primária
- Superfície Biotite: microporosidade obtida através de duplo ataque ácido, aumentando a estabilidade secundária
- Simplicidade na captura e inserção
 - Marcas coloridas indicam posicionamento correto
 - Dimensionador de profundidade
 - Sistema mecânico de captura

Perfuração

800 - 1200 rpm

Inserção

30 rpm

Torque Máx.

45 Ncm

*Para mais informações, consulte a Tabela de Torque na página 76



IMPLANTES Ø 3,5 mm ●


Altura	"D"	"P"	"b"	"d"	"L"	Código	Componentes
8 mm	Ø 3,75 mm	Ø 3,5 mm	0,65 mm	Ø 2,3 mm	8,5 mm	02.04.16.001	TRI NP
10 mm					10,5 mm	02.04.16.002	
11,5 mm					12 mm	02.04.16.053	
13 mm					13,5 mm	02.04.16.003	
16 mm					16,5 mm	02.04.16.004	

IMPLANTES Ø 4,3 mm ●

Altura	"D"	"P"	"b"	"d"	"L"	Código	Componentes
8 mm	Ø 4,3 mm	Ø 4,3 mm	0,70 mm	Ø 2,7 mm	8,5 mm	02.04.16.005	TRI RP-UP
10 mm					10,5 mm	02.04.16.006	
11,5 mm					12 mm	02.04.16.054	
13 mm					13,5 mm	02.04.16.007	
16 mm					16,5 mm	02.04.16.008	

IMPLANTES Ø 5,0 mm ●

Altura	"D"	"P"	"b"	"d"	"L"	Código	Componentes
8 mm	Ø 5,0 mm	Ø 4,3 mm	0,75 mm	Ø 2,9 mm	8,5 mm	02.04.16.025	TRI RP-UP
10 mm					10,5 mm	02.04.16.026	
11,5 mm					12 mm	02.04.16.055	
13 mm					13,5 mm	02.04.16.027	
16 mm					16,5 mm	02.04.16.028	

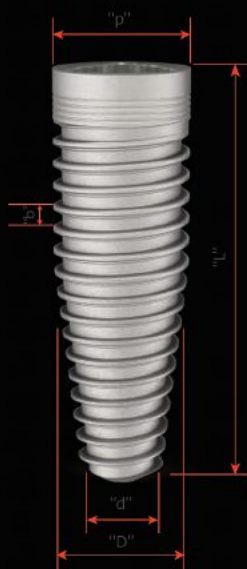

	Descrição	Plataforma	Altura da Cinta	Código
	Parafuso de Cobertura	NP		02.04.09.033
	Pilar de Cicatrização	NP	3 mm	02.04.02.001
			5 mm	02.04.02.002
	Pilar de Cicatrização Perfilado	NP	1 mm	02.04.02.113
			2 mm	02.04.02.123
			3 mm	02.04.02.133
			4 mm	02.04.02.143
	Parafuso de Cobertura	RP-UP		02.04.09.034
	Pilar de Cicatrização	RP-UP	3 mm	02.04.02.005
			5 mm	02.04.02.006
	Pilar de Cicatrização Perfilado	RP-UP	1 mm	02.04.02.213
			2 mm	02.04.02.223
			3 mm	02.04.02.233
			4 mm	02.04.02.243



SEQUÊNCIA DE BROCAS



Altura	Lança	Ø 2,0	Broca Cônica Ø 3,5	Broca Cônica Ø 4,3	Broca Cônica Ø 5,0	Macho de Rosca
Ø 3,5	•	•	•			○
Ø 4,3	•	•	•	•		○
Ø 5,0	•	•	•	•	•	○

○ = Opcional de acordo com a densidade óssea

CHAVE DE INSERÇÃO

- Maior resistência mecânica à inserção
- Potencializa a segurança no transporte do implante
- Preserva a integridade do indexador protético cone morse

A instalação do implante pode ser iniciada com a chave de captura no contra-ângulo.


Posteriormente, a inserção poderá ser finalizada com torquímetro manual.

	Descrição	Código
	Chave de Inserção TRI NP Curta	02.01.11.048
	Chave de Inserção TRI NP Longa	02.01.11.058
	Chave de Inserção TRI RP-UP Curta	02.01.11.049
	Chave de Inserção TRI RP-UP Longa	02.01.11.059

IMPLANTES Ø 4,3 mm ●

Altura	"D"	"p"	"b"	"d"	"L"	Código	Componentes
8 mm	Ø 4,3 mm	Ø 3,5 mm	0,70 mm	Ø 2,7 mm	8,5 mm	02.04.16.059	TRI NP
10 mm					10,5 mm	02.04.16.060	
11,5 mm					12 mm	02.04.16.061	
13 mm					13,5 mm	02.04.16.062	
16 mm					16,5 mm	02.04.16.063	

Componentes possuem codificação por cores para identificar a interface protética ●●

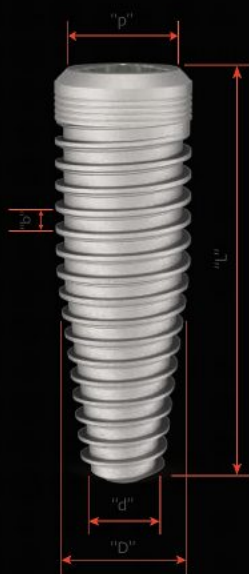

	Descrição	Plataforma	Altura da Cinta	Código
	Parafuso de Cobertura	NP		02.04.09.033
	Pilar de Cicatrização	NP	3 mm	02.04.02.001
			5 mm	02.04.02.002
	Pilar de Cicatrização Perfilado	NP	1 mm	02.04.02.113
			2 mm	02.04.02.123
			3 mm	02.04.02.133
			4 mm	02.04.02.143



SEQUÊNCIA DE BROCAS

						
Altura	Lança	Ø 2,0	Broca Cônica Ø 3,5	Broca Cônica Ø 4,3	Broca Cônica Ø 5,0	Macho de Rosca
Ø 4,3	•	•	•	•		○

○ = Opcional de acordo com a densidade óssea

CHAVE DE INSERÇÃO

- Torque interno com sistema *grip* de captura e inserção
- Maior resistência mecânica à inserção
- Potencializa a segurança no transporte do implante
- Preserva a integridade do triângulo interno
- Chave de inserção única para catraca e contra-ângulo

A instalação do implante pode ser iniciada com a chave de captura no contra-ângulo. Posteriormente, a inserção poderá ser finalizada com torquímetro manual.

	Descrição	Código
	Chave de Inserção TRI NP Curta	02.01.11.048
	Chave de Inserção TRI NP Longa	02.01.11.058


BIODENT HEX

HEXÁGONO EXTERNO | HEX



Características

- Implante cilíndrico levemente cônico na porção apical
- Interface externa hexagonal
- Dupla rosca para agilizar a inserção e minimizar traumas
- Sulcos retentivos nas roscas: maior área de contato e estabilidade primária
- Câmaras com alta capacidade de corte
- Superfície Biotite: microporosidade obtida através de duplo ataque ácido, aumentando a estabilidade secundária
- Simplicidade na captura e inserção
 - Torque interno com sistema *grip* de captura e inserção
 - Travamento mecânico
 - Chave de inserção para torquímetro

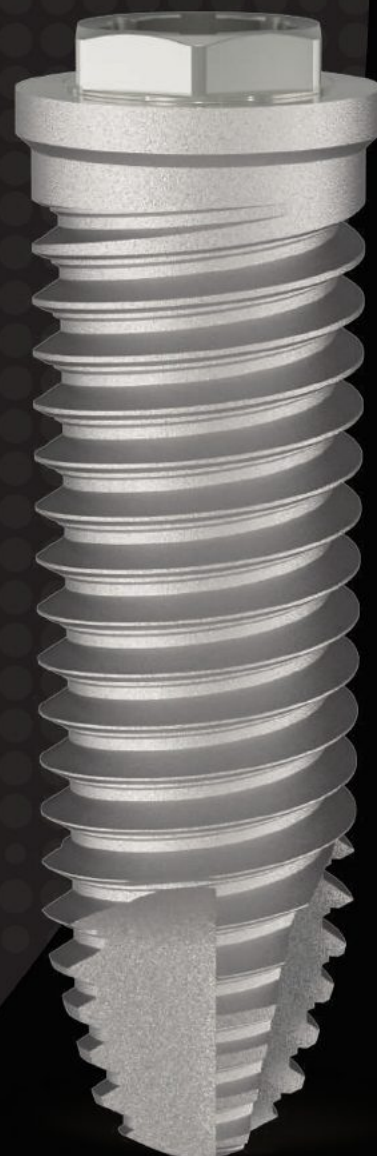

Perfuração

800 - 1200 rpm

Inserção

30 rpm

Torque Máx.

45 Ncm

*Para mais informações, consulte a Tabela de Torque na página 76

IMPLANTES Ø 3,3 mm


Altura	"h"	"p"	"a"	"b"	"D"	"d"	"L"	Código	Componentes
8,5 mm	0,7 mm	Ø 3,5 mm	2,4 mm	1,0 mm	Ø 3,3 mm	Ø 2,1 mm	8 mm	02.03.16.026	HEX NP
10 mm							9,5 mm	02.03.16.027	
11,5 mm							11 mm	02.03.16.028	
13 mm							12,5 mm	02.03.16.029	
15 mm							14,5 mm	02.03.16.030	

IMPLANTES Ø 3,75 mm


Altura	"h"	"p"	"a"	"b"	"D"	"d"	"L"	Código	Componentes
8,5 mm	0,7 mm	Ø 4,1 mm	2,7 mm	1,2 mm	Ø 3,75 mm	Ø 2,3 mm	8 mm	02.03.16.006	HEX RP-UP
10 mm							9,5 mm	02.03.16.007	
11,5 mm							11 mm	02.03.16.008	
13 mm							12,5 mm	02.03.16.009	
15 mm							14,5 mm	02.03.16.010	

IMPLANTES Ø 5,0 mm

Altura	"h"	"p"	"a"	"b"	"D"	"d"	"L"	Código	Componentes
8,5 mm	0,7 mm	Ø 4,1 mm	2,7 mm	1,6 mm	Ø 5,0 mm	Ø 3,2 mm	8 mm	02.03.16.036	HEX RP-UP
10 mm							9,5 mm	02.03.16.037	
11,5 mm							11 mm	02.03.16.038	
13 mm							12,5 mm	02.03.16.039	
15 mm							14,5 mm	02.03.16.040	

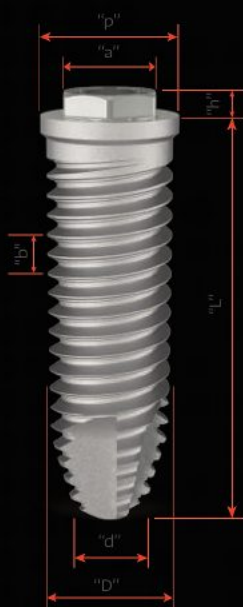

	Descrição	Plataforma	Altura da Cinta	Código
	Parafuso de Cobertura	NP		02.03.09.025
		RP-UP		02.03.09.024
	Pilar de Cicatrização	NP	3 mm	02.03.02.001
			5 mm	02.03.02.002
		RP-UP	3 mm	02.08.02.002
			5 mm	02.08.02.004

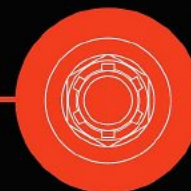

SEQUÊNCIA DE BROCAS



Altura	Lança	Ø 2,0	Ø 2,8	Ø 3,0	Ø 3,15	Ø 3,5	Ø 4,3	Macho de Rosca	Countersink UN
Ø 3,3	●	●	○					○	○
Ø 3,75	●	●	●	○				○	○
Ø 5,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○

○ = Opcional de acordo com a densidade óssea

CHAVE DE INSERÇÃO

- Maior resistência mecânica à inserção
- Potencializa a segurança no transporte do implante
- Preserva a integridade do hexágono externo

A instalação do implante deve ser iniciada com a chave de captura no contra-ângulo. Posteriormente, a inserção poderá ser finalizada com torquímetro manual.

	Descrição	Código
	Chave de Inserção CA HEX NP Média	02.01.11.076
	Chave de Inserção CA HEX NP Longa	02.01.11.106
	Chave de Inserção CA HEX RP-UP Curta	02.01.11.096
	Chave de Inserção CA HEX RP-UP Média	02.01.11.077
	Chave de Inserção TQ HEX NP Curta	02.01.11.050
	Chave de Inserção TQ HEX NP Média	02.01.11.051
	Chave de Inserção TQ HEX RP-UP Curta	02.01.11.053
	Chave de Inserção TQ HEX RP-UP Média	02.01.11.054

KORT HEX

HEXÁGONO EXTERNO (IMPLANTE CURTO) | HEX



Características

- Implante cilíndrico levemente cônico na porção apical
- Interface externa hexagonal
- Implante cilíndrico curto com 5,5 mm e 7 mm de comprimento
- Torque interno com sistema *grip* de captura e inserção
- Dupla rosca para agilizar a instalação e minimizar traumas
- Mesma linha de componentes utilizados para o implante Biodent HEX
- Câmaras cortantes na região apical
- Sulcos retentivos nas roscas
- Superfície Biotite: microporosidade obtida através de duplo ataque ácido, aumentando a estabilidade secundária
- Simplicidade na captura e inserção
 - Travamento mecânico
 - Chave de inserção para torquímetro
 - Chave codificada por cores facilitam identificação da plataforma protética

Perfuração

450 - 600 rpm

Inserção

30 rpm

Torque Máx.

45 Ncm

*Para mais informações, consulte a Tabela de Torque na página 76



IMPLANTES Ø 4,0 mm


Altura	"h"	"P"	"a"	"b"	"D"	"d"	"L"	Código	Componentes
5,5 mm	0,7 mm	Ø 3,5 mm	2,4 mm	1,0 mm	Ø 4,0 mm	Ø 3,70 mm	5,5 mm	02.03.16.049	HEX NP
7,0 mm							7 mm	02.03.16.050	

IMPLANTES Ø 5,0 mm

Altura	"h"	"P"	"a"	"b"	"D"	"d"	"L"	Código	Componentes
5,5 mm	0,7 mm	Ø 4,1 mm	2,7 mm	1,2 mm	Ø 5,0 mm	Ø 4,70 mm	5,5 mm	02.03.16.051	HEX RP-UP
7,0 mm							7 mm	02.03.16.052	



	Descrição	Plataforma	Altura da Cinta	Código
	Parafuso de Cobertura	NP		02.03.09.025
		RP-UP		02.03.09.024
	Pilar de Cicatrização	NP	3 mm	02.03.02.001
			5 mm	02.03.02.002
		RP-UP	3 mm	02.08.02.002
			5 mm	02.08.02.004

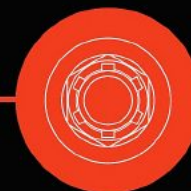

SEQUÊNCIA DE BROCAS*



	Lança	Ø 2,0	Ø 2,8	Ø 3,2	Ø 3,6	Ø 4,2	Ø 4x5,5	Ø 4x7	Ø 5x5,5	Ø 5x7
Ø 4 x 5,5	•	•	•	•			•			
Ø 4 x 7	•	•	•	•				•		
Ø 5 x 5,5	•	•	•	•	•	•			•	
Ø 5 x 7	•	•	•	•	•	•				•

* Recomendamos o uso do Kit de Brocas Kort (página 56)

CHAVE DE INSERÇÃO

- Maior resistência mecânica à inserção
- Potencializa a segurança no transporte do implante
- Preserva a integridade do hexágono externo

A instalação do implante deve ser iniciada com a chave de captura no contra-ângulo. Posteriormente, a inserção poderá ser finalizada com torquímetro manual.

	Descrição	Código
	Chave de Inserção CA HEX NP Média	02.01.11.076
	Chave de Inserção CA HEX NP Longa	02.01.11.106
	Chave de Inserção CA HEX RP-UP Curta	02.01.11.096
	Chave de Inserção CA HEX RP-UP Média	02.01.11.077
	Chave de Inserção TQ HEX NP Curta	02.01.11.050
	Chave de Inserção TQ HEX NP Média	02.01.11.051
	Chave de Inserção TQ HEX RP-UP Curta	02.01.11.053
	Chave de Inserção TQ HEX RP-UP Média	02.01.11.054